
	<b>PROTAP</b> Tata Cara Transfer Alkohol	No : PHPPP026
		Revisi : 03
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

#### 1 Tujuan

Agar setiap proses transfer atau pemindahan alkohol dilakukan dengan cara yang tepat sehingga tidak menimbulkan pencemaran disekitarnya.

#### 2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk menangani transfer atau pemindahan alkohol yang ada di Produksi Herbal.

#### 3 Penanggung Jawab

- 3.1. Penanggung jawab untuk melatih dan mengevaluasi pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Herbal.
- 3.2. Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator.

#### 4 Prosedur

##### 4.1. Transfer alkohol segar / baru

Untuk pemakaian alkohol segar / baru, gunakan pompa non explosion proved. Sedot dengan pompa dan buka valve menuju tangki ekstraksi atau tangki penampung solven untuk ekstraksi.

##### 4.2. Transfer alkohol dari mesin retriifikasi ke tangki penampung besar (reservoir)

Untuk hasil retriifikasi, tampung alkohol kedalam tangki penampung, lalu alirkan kedalam reservoir dengan membuka valve ke arah reservoir.

##### 4.3. Transfer perkolat ke evaporator.

Pindahkan perkolat kedalam evaporator dengan cara manual penuangan atau dengan pompa transfer cairan.

##### 4.4. Transfer alkohol ex evaporasi dari evaporator ke drum penampung.

Pasang selang dari valve pengeluaran destilat mesin evaporasi ke mulut drum penampung. Buka valve pengeluaran sedikit demi sedikit sampai alkohol destilat mengalir ke dalam drum penampung. Bila tersisa tinggal sedikit, lepaskan selang. Tampung destilat dalam wadah lain (ember) lalu pindahkan ke drum penampung.

#### 5 Pustaka

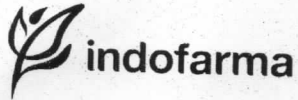

-

#### 6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	09 Feb 2015	Protap terbitan pertama
01	21 Mar 2019	Pada format dokumen mengikuti ketentuan penyusunan dokumen No. XQS011
02	24 Mar 2021	Pada cakupan, penanggung jawab, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan
03	10 MAY 2023	Pada cakupan, penanggung jawab, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan

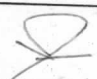
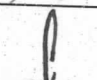


#### 7 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang ( jika perlu ) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

	<b>PROTAP</b> Tata Cara Transfer Alkohol	No : PHPPP026
		Revisi : 03
		Berlaku : <b>10 MAY 2023</b>
		Paraf : 

- 8 **Distribusi**  
Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Herbal.

9 **Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		10 Mei 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		10 Mei 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		10 Mei 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023

10 **Tinjauan**

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			